

# N 4

## ソラデーN4

- 虫歯・歯周病・口臭の原因でもある歯垢(しこう)を効果的に除去する歯ブラシです。
- **TiO<sub>2</sub>(酸化チタン)半導体**はソラデーシリーズ独自の加工技術に応用しました。(特許取得済)
- ブラシ部分の交換だけでホルダー部分は長くお使い頂けます。
- 奥歯・歯と歯の間・歯の溝に届きやすい『先端ポイント毛』を採用。
- 本製品は、日本の工業技術を活かし、国内生産にこだわりました。



### ご使用方法

- 1 ブラシを装着したまま、ブラシとTiO<sub>2</sub>半導体を水で濡らします。
  - 2 導電性ラバー(黒いライン)に触れるようにお持ち下さい。丁寧なブラッシングのためにはペンダグリップがおすすめです。
  - 3 歯みがき剤はごく少量の使用で十分です。ぜひ一度、水だけでご使用下さい。
  - 4 使用時はお部屋や洗面台などの照明を点灯し、明るい場所でブラッシングして下さい。
- 保管時に光は必要ありません。

### ブラシの交換

- ブラシ交換の目安は約1か月。毛先が開いたら取り替えて下さい。
- 取りはずし方:ブラシ部とホルダー部を水平にしてまっすぐ引き抜いて下さい。
- 取り付け方:カチッと音がするまで確実に差し込んでご使用下さい。

### お手入れ

- ご使用後はブラシの汚れをしっかりと水洗いして下さい。
- ブラシを外し、TiO<sub>2</sub>半導体と装着部分を水洗いして下さい。
- ブラシをホルダーに装着し、水を切って風通しの良い所で保管して下さい。

### ご注意


- 本品は電動歯ブラシではありません。
- ペースメーカー・除細動器をご使用の方は本製品を使用しないで下さい。
- 口中を傷つけないために、ブラシを装着せずにホルダー部を口の中に入れて下さい。
- 水だけのブラッシングで、食物などの色素による着色汚れが気になる場合は、歯みがき剤をご使用下さい。
- 強いグリップ圧は、本体破損の原因となります。軽いペンダグリップでご使用下さい。

### スペア ブラシ

- スペアブラシは全てのソラデーシリーズに装着可能です。
- スペアブラシのラインナップはブランドサイトをご覧ください。



<http://www.kk-shiken.co.jp>

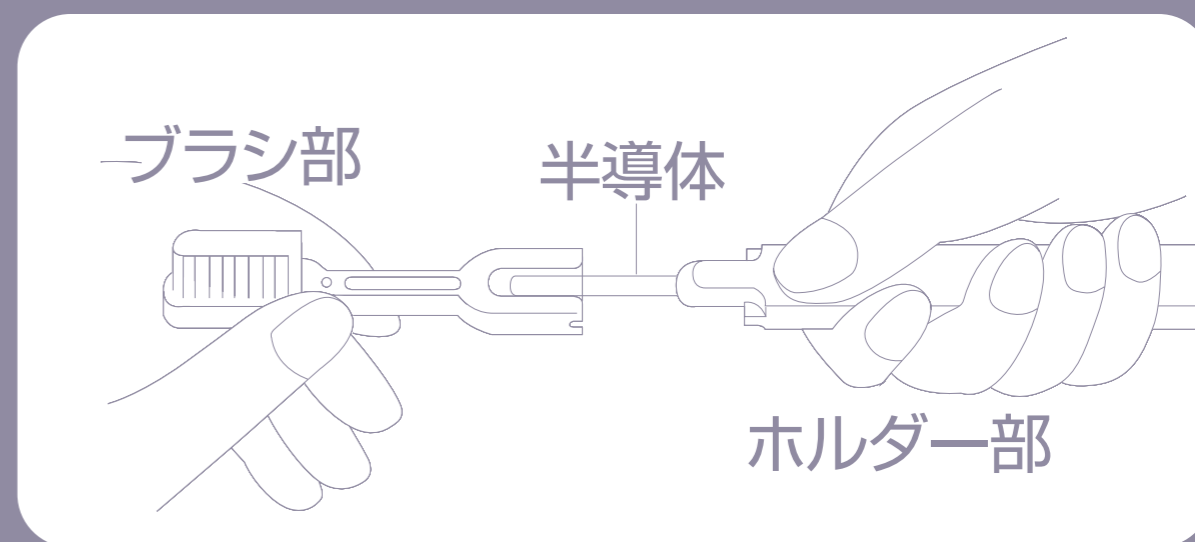

ブラシの交換方法